

# Návod na použitie Hypersphere Mini

## Pokyny pred prvým použitím

Hypersphere Mini je najmodernejšie fitness a regeneračné zariadenie, ktoré využíva tlak a vibrácie na zlepšenie celkovej výkonnosti tela.

Hypersphere Mini je špičkové masážne zariadenie, ktoré využíva pulzujúce vibrácie na zlepšenie celkovej výkonnosti tela.

Hypersphere Mini ponúka ľuďom všetkých vekových kategórií a výkonnostných úrovní výhody na zlepšenie celkovej výkonnosti tela, urýchlenie zotavenia, zvýšenia flexibility a rozsahu pohybu.

## Nabíjanie:

- Pred prvým použitím nabíjajte batériu po dobu až 2 hodín.
- Na nabíjanie, pripojte USB kábel do nabíjacieho portu zariadenia a k akémukoľvek USB nabíjacímu portu.
- Jednotka sa nabije bez ohľadu na to či je Hypersphere Mini zapnutý alebo vypnutý.
- Na zapnutie zariadenia podržte horné tlačidlo po dobu 3 sekúnd, pokým sa LED indikátory nerozsvietia. Modré LED indikátory zobrazujú úroveň rýchlosti vibrácií, nabitia a signalizujú aktívne nabíjanie.
- LED kontrolky ostanú rozsvietené po úplnom nabití, keď je adaptér pripojený a zapnutý.
- Jednotku možno nabíjať kedykoľvek pri akejkolvek úrovni nabitia batérie
- Neodporúča sa úplne vybiť batériu na červenú LED
- Priemerná doba chodu je viac ako dve hodiny v závislosti od úrovne vibrácie. (2 hodiny pri leveli 3 a viac ako 2 hodiny pri nižších leveloch)
- Podržaním horného tlačidla sa odpojí napájanie od obvodov. Odporúča sa počas nepoužívania/cestovania.

## Prevádzka:


- Hypersphere Mini zapnete podržaním horného tlačidla po dobu 3 sekúnd, dokým sa modré LED indikátory nerozsvietia. Zariadenie vypnete opakovaným podržaním horného tlačidla po dobu 3 sekúnd, dokým LED indikátory nezhasnú.
- S tlačidlom v polohe ON (zapnuté) stlačte raz tlačidlo napájania, aby ste zariadenie zapli na úroveň 1, dvakrát, aby ste zariadenie prepli na úroveň 2 a trikrát na úroveň 3. Opätovným stlačením tlačidla napájania zariadenie vypnete. Modrá LED kontrolka indikuje príslušnú úroveň výkonu.
- Jednotka sa vypne po 10 minútach používania. Ak chcete pokračovať, jednoducho ho opäť zapnite na požadovaný level.

## Údržba, čistenie, skladovanie:

- Na čistenie zariadenia používajte mierne navlhčený uterák a suchú handričku.
- Udržujte mimo dosahu otvorených zdrojov tepla, kvapalín a detí.

## Varovania a upozornenia

- Neponárajte do vody. Uchovávajte mimo dosahu kvapalín alebo zdrojov tepla. Ventilačné otvory, tlačidlá a prepínače udržiavajte bez prachu a nečistôt.
- Neodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte zariadenie rozoberať.
- Nepracujte nepretržite dlhšie ako jednu hodinu. Pred opätovným použitím nechajte prístroj 30 minút odpočívať.
- Nenabíjajte bez dozoru alebo nenechajte nabíjať zariadenie cez noc.
- Nepoužívajte pod dekou alebo vankúšom. Zariadenie sa môže prehriať a spôsobiť oheň, elektrický šok alebo iné poranenie.
- Po nabíjaní alebo pred použitím odpojte nabíjačku od prístroja.
- Osoba ťažšia ako 250lb. /113 kg môže zariadenie poškodiť počas normálneho používania.
- Len pre dospelých. Nepoužívajte na zranenia. Pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojim lekárom.

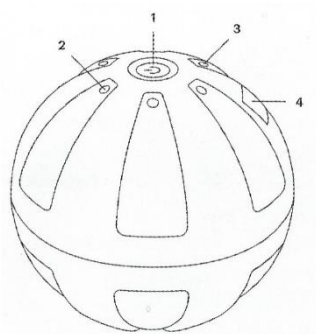

1. Tlačidlo zapínania
2. Indikátor stavu batérie LED (červené, zelené)
3. Indikátor rýchlosti LED (modré)
4. USB Nabíjací port
5. USB Nabíjací kábel (nezobrazený)

## Špecifikácia

- Nabíjanie: 5V DC- 1A
- Opakovane nabíjateľná lítiovo-iónová batéria 2400mAh
- Motor RPM: Nízky 2500, Stredný 3100, Vysoký 3700
- Frekv. (Hz): Level 1 – 42Hz, Level 2 – 52Hz, Level 3 – 62Hz
- Váha: 0,75 lbs / 0,34 kg

## Nepoužívajte Hypersphere Mini, ani žiadne vibračné zariadenie bez predchádzajúceho súhlasu svojho lekára v prípade nasledujúcich indikácií:

- Tehotenstvo, cukrovka s komplikáciami ako sú neuropatia alebo poškodenie sietnice, nosenie srdcových stimulátorov, nedávna operácia, epilepsia alebo migrény, hernie platničiek, spondylolistéza, spondylolysis, alebo spondylóza, nedávna náhrada kĺbov alebo IUD, kovové šróby alebo kovová platne v tele, alebo akékoľvek obavy o fyzické zdravie.
- Pri používaní akéhokoľvek vibračného zariadenia by mali byť krehké osoby a deti pod dohľadom dospelej osoby.
- Tieto kontraindikácie neznamenajú, že nemôžete používať vibračné alebo cvičebné zariadenie, ale odporúčame Vám poradiť sa najprv s lekárom.
- Prebieha výskum zameraný na účinky vibračného cvičenia na špecifické zdravotné poruchy. Výsledkom bude pravdepodobne skrátenie zoznamu kontraindikácií, ako je uvedené vyššie. Praktické skúsenosti ukázali, že integrácia vibračného cvičenia do liečebného plánu je v mnohých prípadoch odporúčaná. To sa musí vykonať na odporúčanie a v sprievode lekára, špecialistu alebo fyzioterapeuta.